


¿CÓMO SABER SI EL HAIRMAX ES ADECUADO PARA USTED?

HairMax® es más efectivo en hombres y mujeres en etapas tempranas o moderadas de adelgazamiento y pérdida del cabello. Si su pérdida de cabello se parece a la imagen de abajo, HairMax es recomendado para usted.

MUJERES



HOMBRES

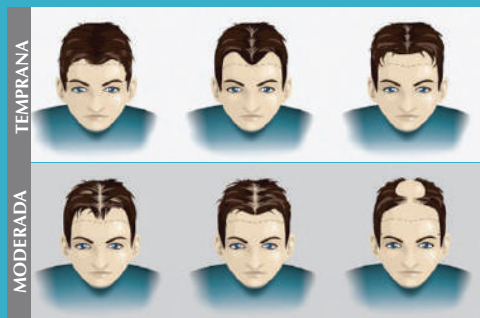

RECOMENDADO POR DOCTORES

Médicos mundialmente recomiendan la terapia de luz láser de HairMax a sus pacientes. HairMax está respaldado por una junta de asesores médicos con más de 30 figuras claves de autoridad en los campos de la dermatología y la restauración del cabello.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Con qué frecuencia tengo que usar mi LaserBand 41?

Se recomienda que use su LaserBand 41 tres veces en semana por un mínimo de 3 minutos, dejando al menos un día entre cada tratamiento.

¿Tendré mejores resultados si uso mi LaserBand 41 más de 3 veces por semana?

El tiempo de tratamiento óptimo es tres veces por semana. El uso del LaserBand más de tres veces por semana no ha mostrado beneficios adicionales.

¿Debo usar mi LaserBand 41 en cabello mojado o seco?

Puede utilizar su dispositivo en cabello seco o húmedo. Es importante que el cuero cabelludo este limpio y libre de productos. La acumulación de productos tópicos tales como aceites, geles, aerosoles, etc. pueden impedir que la luz láser llegue efectivamente a los folículos.

¿Tengo que usar mi LaserBand 41 con algún otro producto?

No, sin embargo, recomendamos usar la colección HairMax for den•si•ty. Estos productos sin sulfatos y de bajo pH son suaves para el cabello que está adelgazando y complementan el tratamiento láser.

CUIDADO HAIRMAX PARA EL ADELGAZAMIENTO DEL CABELLO

Desde las raíces hasta las puntas, HairMax le da nueva vida a su cabello delgado con la colección del den•si•ty, una línea completa de productos para el cuidado del cabello especialmente formulada que incluye champú, acondicionador, tratamientos para el cuero cabelludo, suplementos y fibras capilares.




LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE DISPOSITIVOS LÁSER PARA EL CRECIMIENTO DEL CABELLO



HAIRMAX®
The science of hair growth.™

CÓMO LA TERAPIA DE LUZ LÁSER PROMUEVE EL CRECIMIENTO DEL CABELLO

HairMax® funciona a través de un proceso llamado fotobiostimulación, que proporciona energía de luz terapéutica y nutritiva a los folículos capilares. Este impulso de luz láser revitaliza y estimula los folículos pilosos debilitados, restablece el ciclo de crecimiento natural del cabello, revierte el proceso de adelgazamiento y estimula el crecimiento del cabello para darle más densidad, volumen y vitalidad.

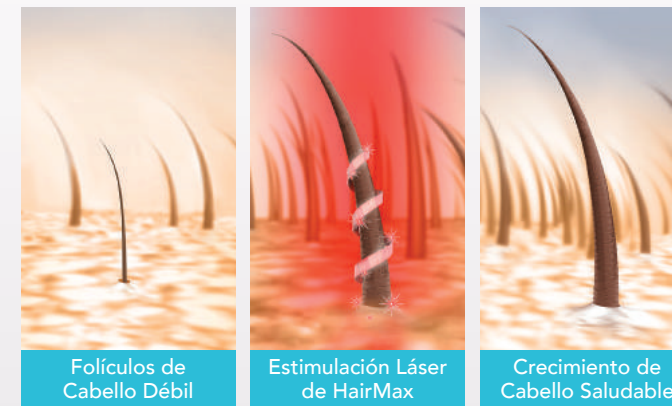

FOTOTERAPIA LÁSER PARA EL CRECIMIENTO DE CABELLO

TECNOLOGÍA PROBADA CLÍNICAMENTE

Los dispositivos láser HairMax han demostrado ser seguros y efectivos en 7 estudios clínicos donde participaron un total de 460 hombres y mujeres. Los participantes experimentaron un aumento promedio de 129 nuevos cabellos por pulgada cuadrada en la visita de seguimiento.

más del **90%** de los participantes en estudios clínicos experimentaron crecimiento de cabello significativo

La Nueva Generación de Dispositivos Para el Crecimiento del Cabello



Dientes patentados para la entrega directa de energía láser

41 diodos láser de grado médico.

No LEDs.

FLEX-FIT
diseño de banda flexible y cómodo

Base de carga elegante

TECNOLOGÍA PROBADA CLÍNICAMENTE

APROBADO POR LA FDA*

RECOMENDADO POR DOCTORES

3 ELEMENTOS PARA EFICACIA

Nuestro diseño patentado incluye 3 elementos para eficacia – dientes patentados que separación el cabello, intensidad de luz láser y densidad de luz láser – lo que proporciona un tratamiento altamente eficaz para la pérdida del cabello.

HAIRMAX® LASERBAND 41

El LaserBand 41 está diseñado para máxima eficacia, comodidad y facilidad de uso. Está diseñado como una banda flexible que se adapta a todos los tamaños de cabeza cómodamente. El LaserBand brinda energía de luz terapéutica con 41 láseres de grado médico, proporcionando energía de luz concentrada a los folículos capilares, a diferencia de los LED que no lo hacen. Es liviano y funciona con una batería recargable ya instalada, lo que permite la libertad de movimiento durante el tratamiento y la portabilidad mientras viaja.

VER PARA CREER

ANTES

DESPUÉS



Mujer: Crecimiento significativo de nuevo cabello en el área de la sien. Resultados individuales pueden variar.

ANTES

DESPUÉS



Hombre: Crecimiento significativo de nuevo cabello en el área frontal. Resultados individuales pueden variar.

NUTRE. ESTIMULA. CRECE.



- Estimula el Crecimiento del Cabello
- Trata la Pérdida del Cabello
- Revierte el Proceso de Adelgazamiento
- Aumenta la Densidad y Abundancia
- Revitaliza el Cabello Dañado
- Sin Efectos Secundarios Dañinos
- Tratamiento Libre de Drogas

APROBADO POR LA FDA* PARA HOMBRES Y MUJERES



*Los dispositivos HairMax están indicados para el tratamiento de la alopecia androgenética y promover el crecimiento del cabello en las mujeres bajo la clasificación Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, o patrones frontales de la pérdida del cabello y en los hombres bajo la clasificación Norwood Hamilton de IIa hasta V y que ambos tienen tipos de piel Fitzpatrick I a IV. Luz láser - Evite la exposición directa a los ojos.